

処理袋

バケツを洗う手間が省ける！ 介助する方の負担を軽減

ポータブルトイレ用処理袋

すっきりポイ




バケツを洗わず
「すっきり」簡単片付け！



バケツに
取り付ける、
排泄物の
処理袋です

ポータブルトイレ用処理袋の特長

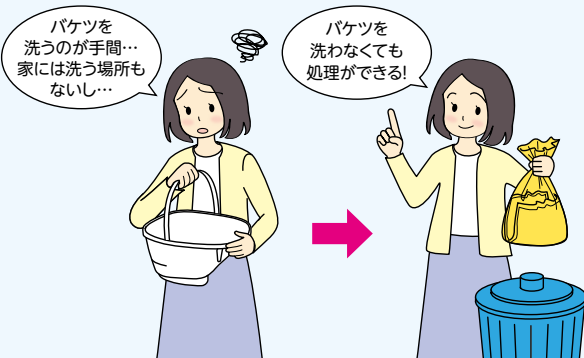


「すっきりポイ」の特長

- 「すっきりポイ」は、「安寿」のポータブルトイレ用バケツにぴったりのサイズです！

吸収シートの尿吸収量1000ml

※吸収量は、使用状況によって減少する場合があります。

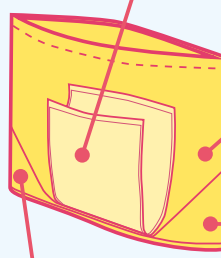

廃棄時に中身が目立たない
イエローカラー

処理袋とわかりにくい
シンプルなデザイン

尿だまり防止加工で
しっかり尿を吸収

処理袋と防臭消耗品との使い分け

- ポータブルトイレのバケツに直接排泄すると…




- 排泄物(特に大便)のニオイが部屋に広がります。
- バケツの底に、排泄物がこびりつきやすくなります。

特にバケツの洗浄が
手間な場合は…

排泄後すぐに処理
できない場合は…


- 「すっきりポイ」をかぶせて使用します。

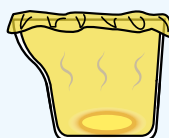

- 袋ごと捨てられるので、バケツを洗う手間が省けます。
- 吸水材が尿を吸収します。
- 大便の場合は、早めの処理をおすすめします。

※脱臭機能付きのポータブルトイレをご利用の場合は、脱臭効果が得られなくなる場合があります。

- 水を張り、防臭消耗品を入れて使用します。

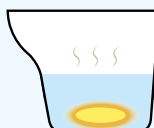

- 排泄物のニオイを抑えられ、部屋にニオイが広がりにくくなります。
- バケツの底へのこびりつきを軽減します。

※「すっきりポイ」と防臭消耗品の併用はできません。

すっきりポイ 30枚入り

3,900円(税抜)



商品コード 533-226

商品サイズ 縦42×横55cm

内容量 30枚

材質 (袋) フィルム: PE
(吸収シート) カバー: ポリオレフィン系不織布/
吸水材: 綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材


色 調 イエロー

梱包入数 8


J A N 858202

「すっきりポイ」の使い方


- ① 「すっきりポイ」をバケツにかぶせます。

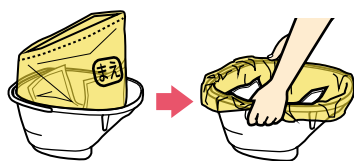


- ② バケツをポータブルトイレにセットします。

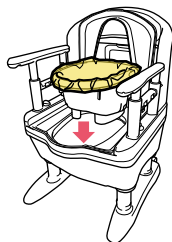

- ③ 排泄が済んだら、バケツから袋を取り出し、
-
- 大便是トイレへ流します。

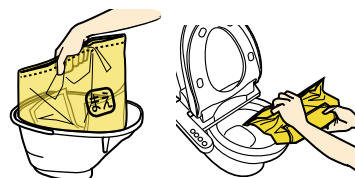

- ④ 袋をきりとり、紐を作って縛り廃棄します。

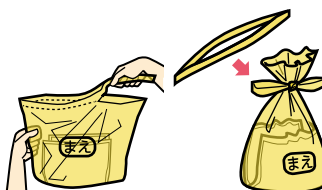

●お住まいの地域の
分別ルールに従って
廃棄してください。
(紙おむつと同様に
処理してください。)

使用上の注意

臭いについて

- ・バケツに水を張って使用するポータブルトイレ用消臭用品は使用することができません。
また、バケツに水を張って本製品を使用することはできません。
- ・脱臭器付のポータブルトイレは、バケツに水を張って使用することを想定しており、
本製品を使用すると効果が得られない場合があります。

温水洗浄便座付ポータブルトイレを使用するとき

- ・洗浄機能を使用すると、洗浄水も吸収シートが吸収するため使用回数が大きく減少します。
- ・洗浄ノズルが本製品に接触すると洗浄機能が使えなくなったり、故障の原因になります。