

ご自分で座位を保つことができる方に。

車いすを利用される方が自力で座位保持できる場合は

身体にかかる圧力を分散して使いやすいフラットタイプがおすすめです。

体圧分散性や目的に合わせ3つの厚みからご利用いただけます。

厚さ4cmの薄さで足つき性の良い スタンダードタイプ

対象者

- ◎自力での座位保持が可能な方
- ◎足こぎされる方
- ◎低床の車いすをお使いの方



□アウルパターン(アウルリハ全品番共通)

アウル・スリット

深さを増したスリットを設け、尾骨から仙骨にかけての圧力を軽減。




アウル・アイ

身体の形に合わせた形状で最も圧力のかかる坐骨部を包み込むようにサポート。



アウル・ライン

身体に沿った形状で誤使用防止と使用時の通気性に配慮。

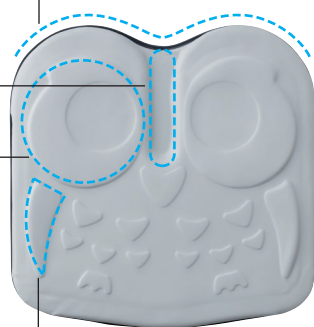

アウル・フェザー

外転防止のために外側を高くしたサポート形状。

OWL REHA

アウルリハ レギュラー

厚み
4 cm

フラット
形状

アウル
パターン

体圧
分散

適度な厚みで体圧分散性を持つ 多用途タイプ

対象者

- ◎自力での座位保持が可能な方
- ◎足こぎされる方
- ◎薄いクッションは不安な方
- ◎厚いクッションは使いにくい方




□エクスジェルを全面配置 (アウルリハ全品番共通)

エクスジェルを坐骨部だけでなく大腿部まで全面に配置。本体表皮はエクスジェルの感触を発揮する、しなやかなストレッチ性の合皮を採用。アルコール消毒なども可能です。



□高品質ウレタンのベストな組み合わせ

ベースのウレタンフォームを最適に組み合わせることで、坐骨部の程良い沈み込み量と安定性のバランスを実現。

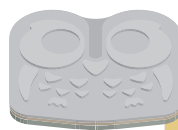

床ずれのリスクが高い坐骨部は、沈み込む低硬度ウレタン。

身体になじむ中硬度ウレタンと高硬度ウレタンのベースで座位を安定。

OWL REHA

アウルリハ ミドル

厚み
6 cm

フラット
形状

アウル
パターン

体圧
分散